




- SRI 8610C 又は 310 本体
- FID 検出器
- クールオンカラム注入口
- MXT-BioDieselTG キャピラリーカラム
- エアーコンプレッサー内蔵

SRI バイオディーゼル GC システムは、バイオ燃料中のフリーおよび結合グリセリンの分析に係る ASTM-6584 に基づく分析が行えるように構成されたシステムです。分析には約 25 分程度を要しますが、ラボ内でもフィールドでも特別な熟練を必要とすることなく測定出来ます。PeakSimple データ処理ソフトはオンラインで濃度測定結果を PC の画面上に表示します。この GC システムは分取も含めた ASTM-6584 の定める全ての条項を満たします。装置操作には約 4 時間のトレーニングで十分です。

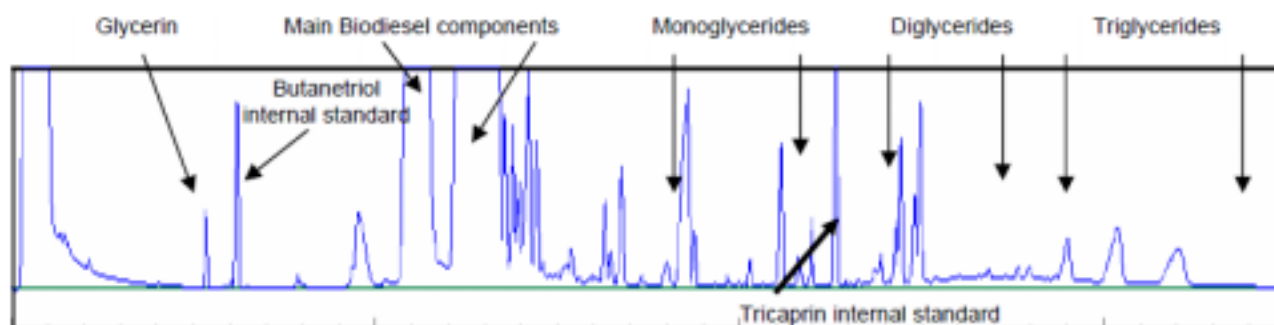

市販バイオディーゼルの代表的クロマトグラム